


МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

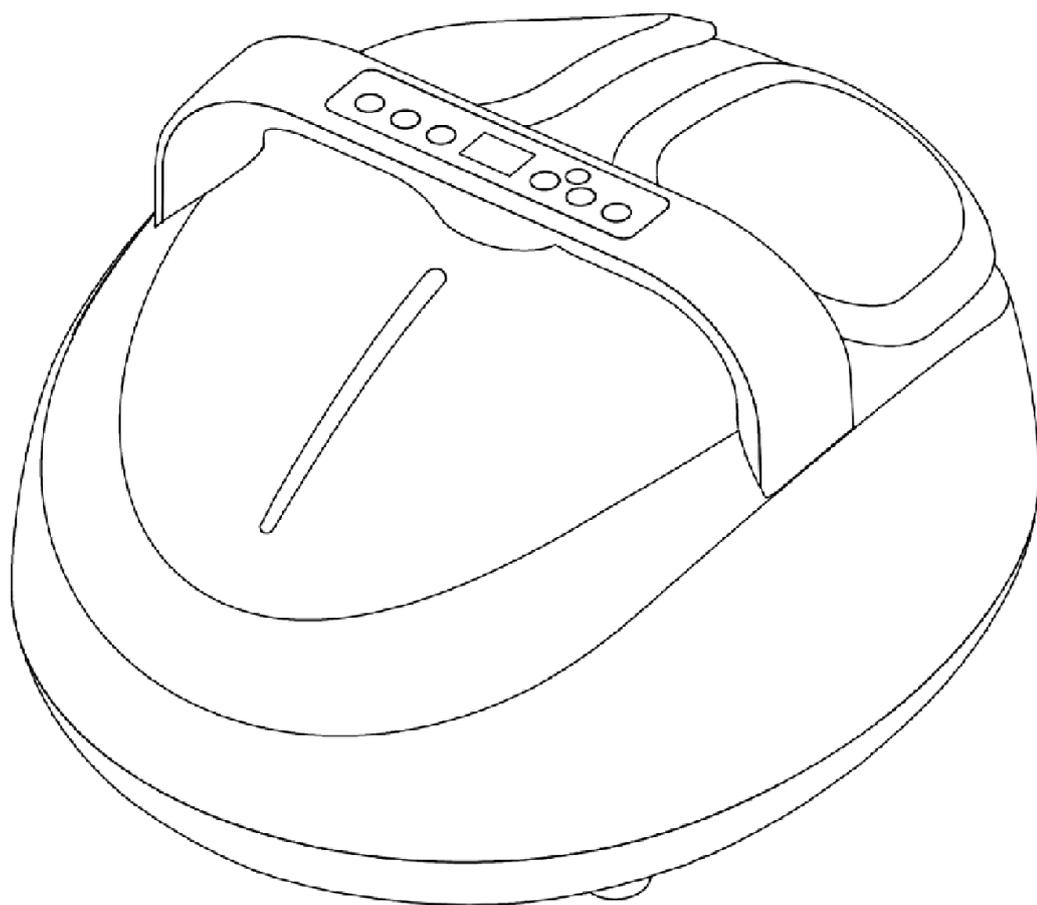

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАССАЖЕРА ДЛЯ НОГ

Благодарим вас за покупку нашего массажера для ног. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и обратите внимание на технику безопасности перед использованием, чтобы правильно использовать это изделие.

В этом руководстве приведены безопасные и эффективные методы работы для пользователей. Пожалуйста, сохраните руководство после прочтения для дальнейшего использования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СОСТАВ ПРОДУКТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОДУКТА

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Важные примечания по технике безопасности

- 1) Для обеспечения безопасного и правильного использования, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием данного изделия.
- 2) Обязательно используйте данное изделие в соответствии с назначением, указанным в руководстве.
- 3) Перед использованием чистящих средств, пожалуйста, выньте вилку из розетки.
- 4) Используйте функцию подогрева с осторожностью, чтобы избежать возможных серьезных ожогов.
- 5) Не используйте при слишком чувствительной коже или плохом кровообращении.
- 6) Не допускайте использования массажера при слишком высокой температуре, чтобы избежать поломки или повреждения.
- 7) Если изделие используется ребенком или находится в непосредственной близости от него, необходимо, чтобы кто-то другой руководил им и отвечал за его безопасность.
- 8) Если вы почувствуете недомогание во время массажа, пожалуйста, немедленно прекратите массаж.
- 9) При возникновении следующих условий: не используйте данное изделие, если поврежден шнур питания или вилка питания не работает нормально, если устройство упало на землю или повреждено, упало в воду, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов для проверки и технического обслуживания.
- 10) Не используйте детали, не рекомендованные производителем.
- 11) Не вставляйте и не роняйте предметы ни в какие отверстия в устройстве.
- 12) Если вы хотите отключить питание, пожалуйста, отключите все системы управления и выньте вилку из розетки.
- 13) Данный продукт нельзя использовать для самодиагностики или лечения, так как необходимость в диагностике или лечении должна решаться врачом.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

А) Использование в условиях окружающей среды

- 1) Не используйте изделие во влажной или пыльной среде, чтобы избежать выхода изделия из строя
- 2) Не используйте данное изделие при комнатной температуре выше 40°C.
- 3) Не размещайте изделие на открытом воздухе
- 4) Не размещайте изделие рядом с обогревателем, плитой или под прямыми солнечными лучами

В) Не используйте данный массажер

Если у вас возникли проблемы, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием

- 1) Оно не подходит для тех, кто проходит лечение у врача
- 2) Его не следует использовать во время менструации или беременным женщинам

Ознакомьтесь с другими вопросами, требующими внимания

- 1) Не прикасайтесь к переключателю управления мокрыми руками
- 2) Не допускайте контакта переключателя управления с водой и другими жидкостями
- 3) Не используйте данное изделие более 30 минут
- 4) Если изделие повреждено, не используйте его
- 5) Не используйте в течение часа до или после еды, чтобы не вызвать побочных эффектов
- 6) При использовании продукта при низкой комнатной температуре не используйте функцию подогрева, рекомендуется постепенно доводить температуру до нормального уровня, а затем использовать
- 7) Если изделие перемещено из низкотемпературного хранилища в теплое помещение, это может быть связано с тем, что внезапное скопление водяного пара в деталях может повлиять на нормальную работу изделия и даже привести к механическим повреждениям, рекомендуется сначала поддержать изделие при нормальной комнатной температуре в течение 1 часа. за час до начала использования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1) Данная гарантия не подлежит передаче другому лицу.

2) Все повреждения, вызванные человеческим фактором, включая использование в ненормальных условиях труда, в нарушение инструкций по эксплуатации и хранению, повреждения, вызванные неправильным использованием, и т.д.


Существует 2 вида функциональных версий:

1. Без воздушной подушки

2. С воздушной подушкой

Данное руководство представляет собой версию с воздушной подушкой, в которой используется та же операция.

СОСТАВ ПРОДУКТА

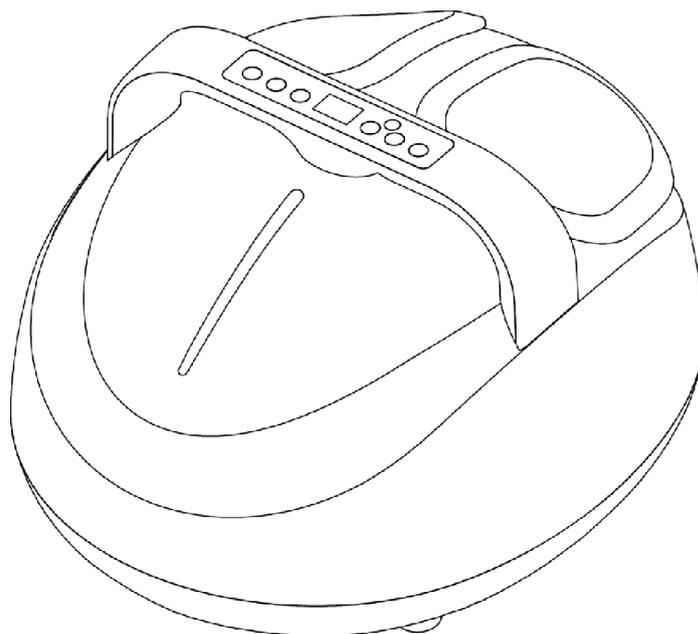

- 1) Центральная поверхность: дисплей
- 2) Передняя нижняя часть по центру: вращающаяся массажная головка - обеспечивает точечный массаж области изгиба стопы с подогревом
- 3) Передняя боковая часть: вращающаяся массажная головка -обеспечивает точечный массаж области стопы
- 4) Передняя нижняя часть стопы: разминание массажной головкой, точечный массаж в области ног
- 5) Внутренняя часть: воздушная подушка, прикрепленная к подъему стопы, обеспечивает воздушную циркуляцию воздуха для массажа
- 6) Передняя нижняя поверхность: моющийся тканевый чехол для чистки
- 7) Дно : устройство для хранения шнура питания -обеспечивает хранение шнура питания

ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Вкл/Выкл

Интенсивность

Таймер

Нагрев

Режимы

Вибрация



Включение/Выключение массажера



Регулирует интенсивность массажа в соответствии с вашими предпочтениями (9 уровней, интенсивность по умолчанию 5)



Установите время массажа (от 05 до 30 минут, по умолчанию 15 минут)



Нажмите кнопку, чтобы самостоятельно управлять нагревом (по умолчанию включено)



Переключение между тремя режимами массажа (режим по умолчанию 1)



U1 U2 два уровня (по умолчанию выключен)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Характеристики продукта

- 1) Стильный и красивый, легкий и удобный
- 2) Набор функций для массажа стоп: вибрация, вращение роликов, компрессия верхней части, надавливание, нагревание - это множество функций оздоровительного массажа в одном устройстве.
- 3) Полный массаж стоп, массаж каждой точки по глубине, чтобы очистить тело от всех меридианных рефлексорных зон стопы.
- 4) Чехол из ткани, который можно стирать, чтобы массажер всегда был в чистоте
- 5) Устройство для хранения шнура питания, которое делает жизнь более удобной
- 6) Прибор имеет нагревательную поверхность, следует обратить внимание на использование тепла лицами, не имеющих противопоказаний.
- 7) Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить обратившись к производителю, или отдела технического обслуживания, или аналогичного подразделения.



РЕЖИМ РАБОТЫ И ФУНКЦИИ

1) Управление: Нажмите кнопку включения, массажер начнет работать, время массажа по умолчанию составляет 15 минут, затем нажмите клавишу, чтобы выключить, массажер прекратит работу.

2) Режим: при включении массажера в **Режим 1** (режим массажа с вращением массажных головок от пятки к пальцам)

Включается автоматически:

Компрессия

Нагрев (при желании можно отключить)

Режим: при включении массажера в **Режим 2** (режим массажа с вращением массажных головок от пальцев к пятке)

Включается автоматически:

Компрессия

Нагрев (при желании можно отключить)

Режим: при включении массажера в **Режим 3**

Включается автоматически:

Компрессия

Нагрев (при желании можно отключить)

Можно включить также **Режим Вибрации (кнопка Вибрация)**

3) Время: время работы массажера по умолчанию составляет 15 минут. При нажатии на **Таймер** вы сами можете выбрать время работы от 5 – 10 -15 – 20 -25 -30 минут

4) Интенсивность: автоматически выбран режим интенсивности 1, при желании можно установить интенсивность от 1 до 9.

5) Обогрев: при включении устройства автоматически включается функция обогрева ног, нажмите кнопку обогрева еще раз, и он отключится, индикатор на дисплее погаснет.

6) Прессотерапия: включается автоматически и работает во всех режимах.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Название: Массажер для ног	Номинальное напряжение: 220V
Время по умолчанию: 15 минут	Номинальная мощность: 45W

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если у вас возникнут проблемы с использованием данного устройства, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими советами и возможными решениями.

Если устройство все еще находится в неисправном состоянии, обратитесь в онлайн-службу поддержки клиентов.

Проблема	Возможные причины	Способ решения
Не работает	<ol style="list-style-type: none">1. Включение питания2. Перегрузка	<ol style="list-style-type: none">1. Подключите источник питания и проверьте.2. Включите переключатель, если контакт с источником питания хороший
Резко перестал работать	<ol style="list-style-type: none">1. Отключение электроэнергии.2. Время массажа превышает установленное время.3. Время непрерывного использования слишком велико, защита от перегрева массажера4. Давление слишком высокое, массажный ролик засорен	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что разъем питания подключен2. Снова включите кнопку выключателя3. Включите кнопку включения после охлаждения массажера4. Повторно нажмите кнопку включения

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОДУКТА

Место хранения

- 1) Если изделие не используется, пожалуйста, положите его в упаковку и поставьте в безопасное сухое место.
- 2) Проветривайте помещение в тени и прохладном месте.
- 3) Не перекручивайте блок питания и провода выключателя.
- 4) Не используйте импульсные блоки питания и проволочные подвески.
- 5) Избегайте царапин на поверхности изделия острыми предметами
- 6) Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры

Очистка

- 1) Перед очисткой убедитесь, что выключатель общего питания выключен, и выньте вилку из розетки
- 2) Протрите поверхность изделия сухой тканью
- 3) Не используйте импульсные источники питания и проволочные подвески
- 4) Не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства, такие как бензол или растворитель