


МАССАЖЕР ДЛЯ РУК И ПАЛЬЦЕВ

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

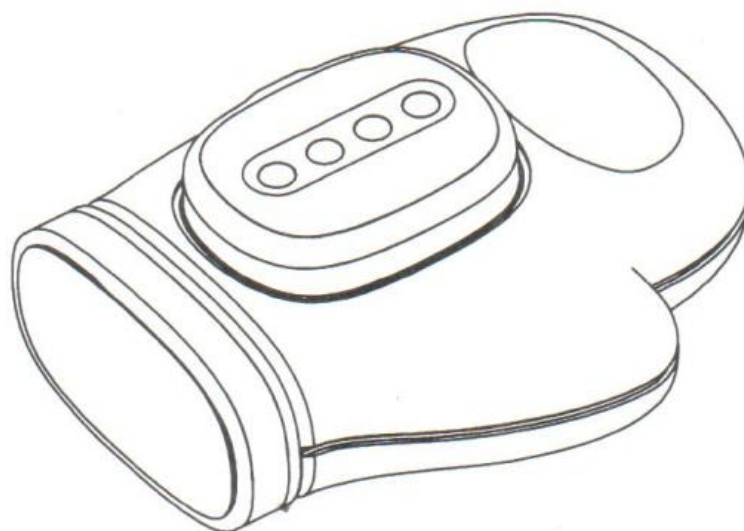

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по использованию перед использованием и храните массажер надлежащим образом.

Меры предосторожности

При использовании данного устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции, приведенные в данном руководстве, особенно меры предосторожности.

Нарушение инструкций может привести к повреждению устройства или даже к возникновению опасности.

Примечание

1. Не используйте для других целей, кроме массажа рук.
2. Не используйте одновременно с другими терапевтическими приборами.
3. Не позволяйте маленьким детям пользоваться устройством или играть с ним.
4. Не используйте его во время сна.
5. Людям, которые не могут выразить свои желания или передвигаться самостоятельно, не следует им пользоваться.
6. Данное изделие предназначено для использования одной рукой, не используйте его обеими руками одновременно.
7. Во время использования не надевайте на массажную зону твердые предметы, такие как ювелирные украшения или лаки для ногтей.
8. Не используйте изделие в местах с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, и не допускайте попадания на него жидкостей, таких как вода.
9. Устройство оснащено нагревательной поверхностью, поэтому люди, которые не чувствительны к нагреву, должны быть внимательны при его использовании.
10. Время работы данного устройства по умолчанию составляет 15 минут. Если вам потребуется использовать его повторно, включите его еще раз. Рекомендуется, чтобы продолжительность одного сеанса массажа не превышала 30 минут, чтобы избежать чрезмерного массажа.

Людям, которым запрещено использование

1. Людям, перенесшим коррекцию костей или хирургическую операцию на руках, запрещается пользоваться аппаратом.
2. Людям с серьезными нарушениями периферической нервной системы и сенсорными нарушениями.
3. Людям с повреждениями кожи.
4. Людям с острой болью, такой как остеопороз, растяжения связок, мышечные напряжения и т.д.
5. Людям, которые не могут самостоятельно пользоваться аппаратом.

Инструкции по эксплуатации и технике безопасности

1. Пожалуйста, выбирайте в соответствии с тем, насколько вы можете выдержать нагрузку, и убедитесь, что устройство плотно прилегает к коже.
2. Рекомендуется использовать кабель для зарядки и стандартный адаптер, прилагаемый к аппарату для зарядки.
3. Не мойте устройство водой.
4. При первом использовании устройства или при разрядке аккумулятора после длительного хранения, пожалуйста, следуйте инструкциям по эксплуатации, чтобы обеспечить его правильную работу.
5. Не используйте его мокрыми руками.

Меры предосторожности

Техническое обслуживание и хранение

1. Очистка

Протирайте мягкой тканью, не мочите основной блок, не протирайте основной блок слишком влажной тряпкой, чтобы вода не попала внутрь основного блока, и не используйте для протирания разбавители, бензин или другие летучие жидкости.

2. Хранение

Храните прибор в недоступном для детей месте, вдали от влаги, высокой температуры, прямых солнечных лучей и водяных брызг. После использования рекомендуется хранить изделие в оригинальной упаковке. Если он не используется в течение длительного времени, рекомендуется заряжать его примерно раз в 30 дней, чтобы избежать разрядки аккумулятора. Срабатывает защита от чрезмерного разряда, что может привести к неправильной зарядке или сбою в ее выполнении.

3. Техническое обслуживание

Не разбирайте, не ремонтируйте и не заменяйте детали самостоятельно, это может привести к поломке устройства. При возникновении неполадок с устройством, пожалуйста, своевременно выключите его, прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр компании.

Параметры устройства Напряжение зарядки, мощность Емкость аккумулятора

Параметры устройства

Напряжение зарядки


5V

Мощность


8W

Емкость аккумулятора

2000mAh

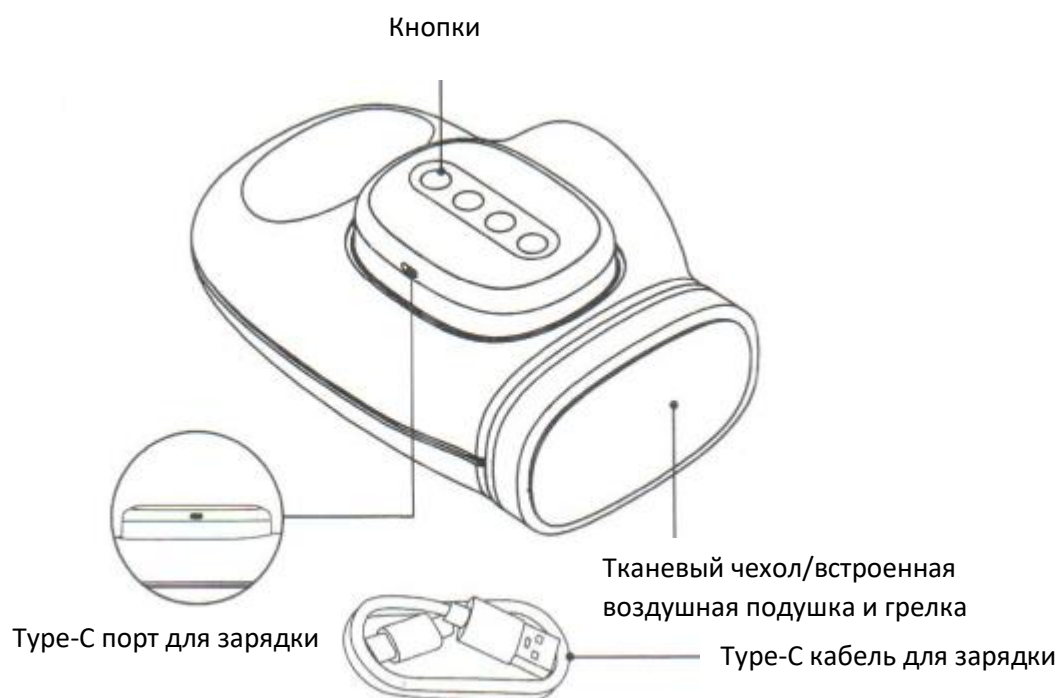

Используйте адаптер, соответствующий
стандарту, 5 V=1 A/5 V=2 A
(используйте свой)

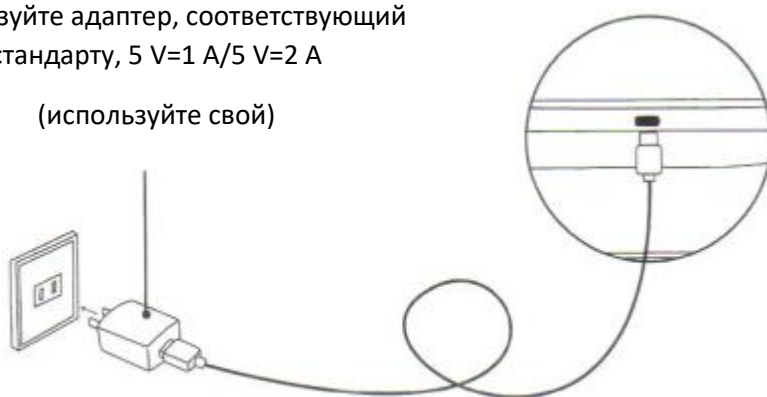


ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Пожалуйста, проверьте, подключено ли устройство к сети. Если мощность слишком низкая и устройство автоматически отключается или не может быть включено, пожалуйста, зарядите его перед использованием.



1. Следите за тем, чтобы ваши руки были чистыми и сухими. Не надевайте украшения.

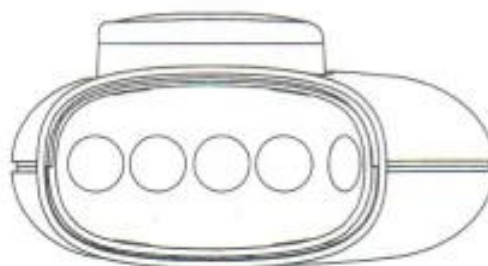

2. Поместите кисть в массажер.




Обратите внимание!


Помещайте и вынимайте руку при выключенном массажере.

ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция по использованию левой и правой рукой.

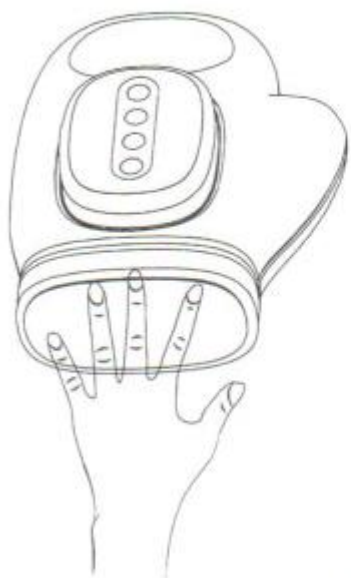


Левая рука

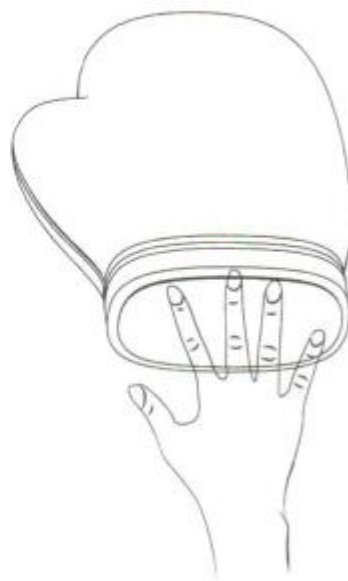

Правая рука

ОПИСАНИЕ МАССАЖЕРА

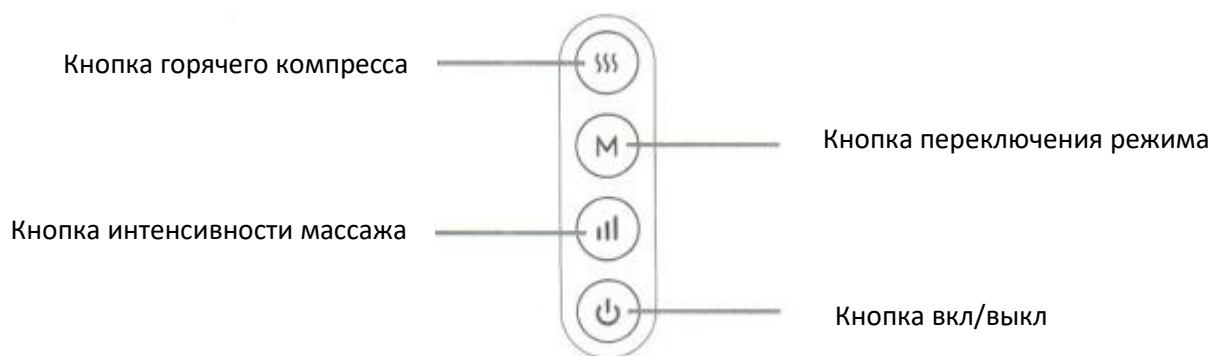

1. Кнопка вкл/выкл

Длительное нажатие " " для включения / выключения.

Когда батарея полностью заряжена: загорится зеленый индикатор;

батарея разряжена: загорится красный индикатор;

зарядка: красный индикатор будет медленно мигать;

полная зарядка: загорится зеленый индикатор.

2. Кнопка интенсивности массажа

Короткое нажатие для переключения между 1-5-й передачами, при включении питания по умолчанию используется 1-я передача.

1-я передача: горит зеленый индикатор;

2-я передача: горит синий индикатор;

3-я передача: горит желтая лампочка;

4-я передача: горит фиолетовая лампочка;

5-я передача: горит красная лампочка.

3. Кнопка Mode

Режим по умолчанию - один при включенном питании.

Короткое нажатие " M " для переключения режим (режим 1, режим 2, режим 3).

Режим 1: горит зеленый индикатор;

Режим 2: горит синий индикатор;

Режим 3: горит красный индикатор.

4. Кнопка горячего компресса

Короткое нажатие для переключения между низким /средним / высоким / горячим компрессом.

Значение по умолчанию - без подогрева.

Горячий компресс низкой мощности: горит зеленый индикатор;

горячий компресс средней мощности: горит желтый индикатор;

горячий компресс высокой мощности: горит красный индикатор;

горячий компресс выключен: горит зеленый индикатор.

Функция	Компрессия	Горячий компресс	Время
Режим 1	Пальцы-ладонь-запястье (все вместе)	-	15 минут
Режим 2	Пальцы-ладонь-запястье (по нарастающей)	-	15 минут
Режим 3	Пальцы-ладонь-запястье (чередование)	-	

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)

Если срок службы основного блока (включая литиевую батарею) и принадлежностей данного устройства истек. Пожалуйста, не выбрасывайте их по собственному желанию, в противном случае будут образовываться электронные отходы, которые будут загрязнять окружающую среду. Перед утилизацией изделия необходимо извлечь из него аккумулятор; перед извлечением аккумулятора устройство необходимо выключить; после извлечения аккумулятора его следует безопасно утилизировать.

Шаг 1: Откройте корпус устройства

Шаг 2: Открутите винты

Шаг 3: Извлеките устройство

Шаг 4: Извлеките аккумулятор

